


Universalfilter für alle Mund-Nasen-Masken | Silberionenbeschichtet | OEKO-TEX STANDARD 100

Der Filtervlies enthält eine bakterizide und hydrophobe Substanz, welche unter anderem Silberionen und Nanopartikel enthält. Es ist weithin bekannt, dass Silberionen eine starke bakterizide, antivirale und fungizide Wirkung haben. Damit wirkt dieser Filter gegen Bakterien, Viren, sowie Sporen und Pilze. Die hydrophobe Beschichtung wirkt gegen Tröpfchen getragene Mikroorganismen und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Filtervlies. (Tröpfchen-Übertragung). Die Nanobeschichtung des Filters verhindert das Durchfeuchten der Masken, wodurch sich die Nutzungsdauer der Masken erheblich verlängert.

Die eingesetzte Substanz überträgt sich nicht auf die Haut des Anwenders. Dies ist durch den Diffusionsplattentest SN 195-920 nachgewiesen.

Der Filtervlies wird auch bei der Herstellung der sehr hochwertigen medizinischen FFP2 und FFP3 Masken eingesetzt. Die Anwendung des Filters in Verbindung mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder Masken mit dafür vorgesehenen Filtertaschen bietet nicht die gleiche Sicherheit wie ein medizinische FFP2 und FFP3 Maske. Durch seine Beschaffenheit erhöht der Filter jedoch Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Mitmenschen erheblich.

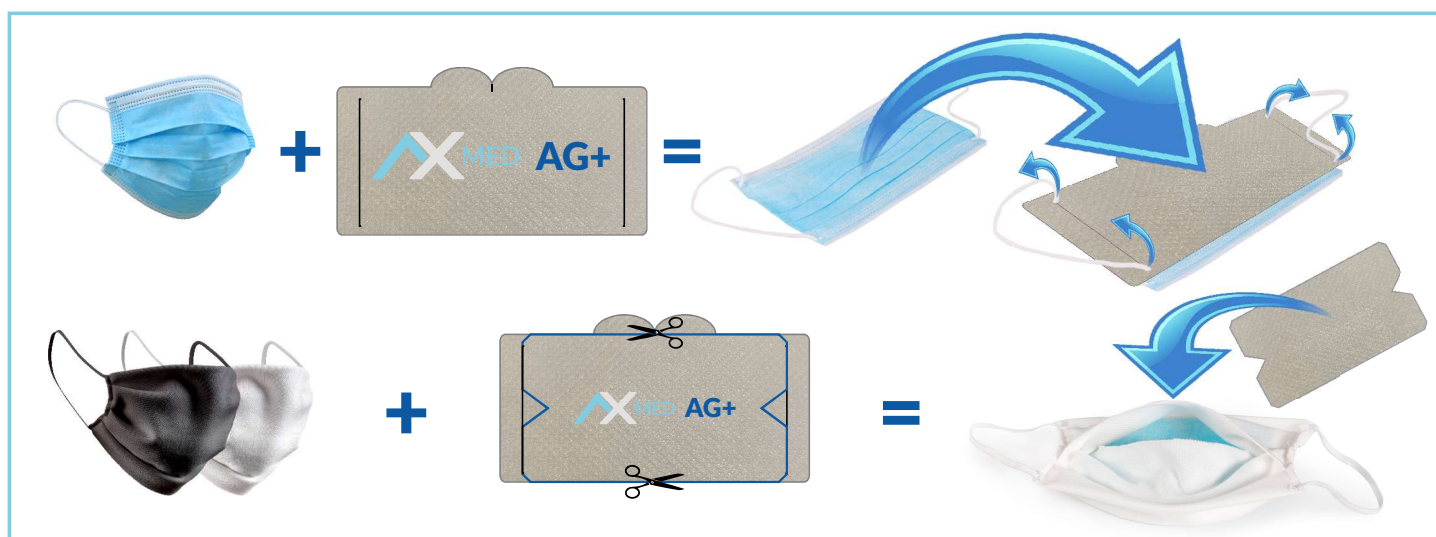

Logistische Daten AG+

EAN-Nummer:	5008266360294
Artikelnummer:	MED0008
VPE:	1 Blister = 10 Stück
Abmessungen (Blister):	260 x 130 x 5mm
VPE (Umkarton):	50 Blister
Abmessungen (Umkarton):	300 x 300 x 150mm
Gewicht (Blister/Umkarton):	25g / 1,51kg

Anwendung

AX MED 3P+
Medizinischer Mund-Nasen-Schutz | OP-Maske



- 1.) Legen Sie den AX MED AG+ Filter auf die Innenseite des Mund-Nasen-Schutz auf.
- 2.) Führen Sie die Ohrschlaufen durch die dafür vorgesehenen Schlitze vom Filter.
- 3.) Achten Sie darauf, dass sich die Nasenflügel oben befinden.

AX MED 2BW und AX MED 2BS
mit integrierter Filtertasche



- 1.) Schneiden Sie die Schablone auf der Verkaufsverpackung aus .
- 2.) Vermitteln Sie die Schablone auf dem Filter und schneiden Sie diesen entsprechend zu.
- 3.) Legen Sie den Filter in die dafür vorgesehene Filtertasche ein.